



Neo Spectra™ ST Effects


שחזורים קדמיים מורכבים, בפשטות.



Neo Spectra™ ST

לכל הטיפולים השגרתיים שלך.

אסתטיקה יעילה עם הקומפוזיטים של
Neo Spectra™ ST



Neo Spectra™ ST flow

קומפוזיט נוזלי אסתטי, רב-שימושי ויעיל.

עשרות שנים של חדשנות בחומרים מרוכבים לימדו אותנו מהם הדברים החשובים לרופאי השיניים.



עמידות



אסתטיקה



נוחות

החומרים המרוכבים של
Neo Spectra™ ST מצטיינים היכן
שזה נחוץ הודות לטכנולוגיית הפילר של
SphereTEC®

היתרונות המרכזיים של חומרי השחזור Neo Spectra™ ST מתאפשרים בזכות השימוש בטכנולוגיית חלקיקי המילוי SphereTEC®. המורפולוגיה, פיזור גודל החלקיקים והמבנה של פני השטח של SphereTEC® מעניקים את היתרונות שחשובים ביותר לרופאי השיניים.


טכנולוגיית חלקיקי
המילוי של
SphereTEC®

הגודל של חלקיקי חלקיקי המילוי SphereTEC® בקוטר 15 מיקרון

נוחות עבודה משופרת

נוחות העבודה עם החומר חיונית להנחה יעילה שלו. צורתם ופיזור הגדלים הרחב של חלקיקי המילוי של SphereTEC® יוצרים אפקט הדומה למסב כדורי, המאפשר התאמה מצוינת ואפשרות לפיסול. בנוסף, החלקיקים שלנו מגבילים את כמות השרף חופשי, למניעת הידבקות.


SPHERICAL

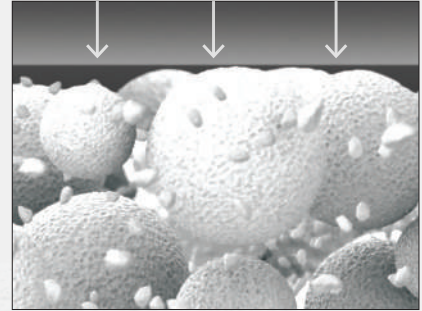

הפשטות שבאסתטיקה

אסתטיקה טבעית צריכה להיות קלה להשגה. חלקיקי המילוי של SphereTEC® תוכננו כך שיאזנו בין אטימות, שקיפות, ספיגת ופיזור אור להשגת אפקט זיקית מעולה. בנוסף, המיקרו-מבנה של החלקיקים מאפשר ליטוש מהיר עד להגעה לברק מושלם.


MICRO-SCALED

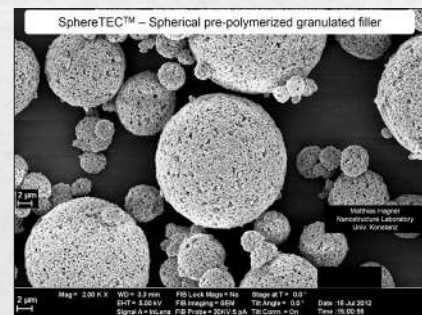

אמינות ואריכות ימים

תוצאות עמידות לאורך זמן משפרות את הרווחיות והמוניטין שלך. צפיפות הדחיסה הגבוהה של חלקיקי המילוי והנעילה המיקרו-מכנית בין חלקיקי המילוי לשרף מספקות חוזק ואריכות ימים לשחזור. יתרה מכך, הקשיית השרף בחלקיקי המילוי מעניקה לשחזור עמידות משופרת להכתמה.

SUPERSTRUCTURES

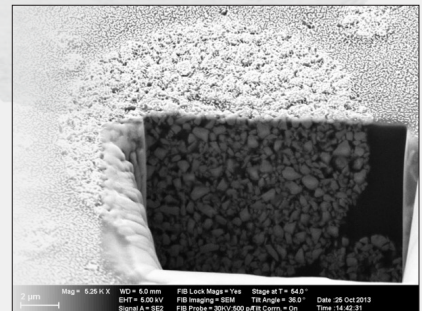

כל שחזור הופך לפשוט עם הקומפוזיטים של Spectra™ ST

פשטות בשחזורים



ST Effects
חומר שחזור מרכב

תוספת של שתי שקיפיות חומר חמשת גוני ה-CLOUD האוני



לכל הטיפולים השגרתיים שלך.



Neo Spectra™ ST
חומר שחזור מרכב אוניברסלי

להתנסות בקלות ונוחות עבודה אופטימלית, בצמיגות אידיאלית ובחמישה גוני CLOUD אוניברסליים המכסים את כל קשת הגוונים של VITA®¹.



Neo עם טכנולוגיית חלקיקי המילוי של SphereTEC®

חומר מרוכב נוזלי אסתטי, רב-שימושי ויעיל.



Neo Spectra™ ST flow
חומר שחזור מרוכב נוזלי

רב שימושי הודות לתכונה של זרימה לפי דרישה, התאמה מושלמת של גוונים לאלו של חומרי השחזור המרוכבים שלנו.



מרכיבים בשיניים קדמיות.



Neo Spectra™
אוניברסלי

דו-תונת מערכת פשוטה של הנחה בשכבות בשלום ברסליים של Neo Spectra™ ST.



שיטת העבודה המועדפת עליך

שתי שיטות עבודה אפשריות עם חומר השחזור האוניברסלי

הודות לטכנולוגיית חלקיקי המילוי SphereTEC[®], החומרים המרוכבים של Neo Spectra[™] ST מאפשרים עבודה אופטימלית בדרגת צמיגות שמנתית ונמרחת, או לחלופין, צמיגות קשה יותר וניתנת לדחיסה, על-מנת להתאים לשגרת העבודה ולטכניקת ההנחה האישית שלך.

74%

מרופאי השיניים מתלוננים על מאפייני העבודה של החומרים המרוכבים, ביניהם התאמת הצורה ודביקות החומר.²



66%

66% מרופאי השיניים משתמשים בחומרי שחזור נוזליים רגילים לשחזורי קלאס V. כ-1/4 משחזורי קלאס V, בממוצע, ממוקמים באזור הקדמי.³

● אינו נדבק לכלי יד

● מתאים בקלות לקירות החלל

● מפוסל בקלות להקניית צורה מתאימה

● עמידות מצוינת בפני קריסה

עבודה נוחה עם חומר השחזור הנוזלי הרב-שימושי

במצבים בהם נדרש השימוש בחומר מרוכב נוזלי באזור האסתטי, חומר השחזור Neo Spectra[™] ST flow מעניק את הביצועים האסתטיים ואריכות הימים שאתם מצפים לה מכל חומר מרוכב המבוסס על טכנולוגיית SphereTEC[®], גם בצורתו הנוזלית.

● זורם לפי דרישה

● התאמה מעולה לקירות החלל

● נשאר במקום בו הונח, ורק עבודה עם כלי יד מפעילה את זרימתו



² סקר משתמשים בחומרים מרוכבים של Dentsply Sirona Restorative, Europe שנערך בשנת 2015, 297 משתתפים.

³ מחקר שימוש בקומפוזיט נוזלי של Dentsply Sirona, אוגוסט 2018.

הפשטות שבאסתטיקה


גווני CLOUD אוניברסליים לשחזורים שגרתיים

שילוב חלקיקי המילוי הראשוניים של SphereTEC® והשרף יוצרים יחד אפקט זיקית מצוין להתאמה פשוטה יותר של גוון השחזור. למרבית המקרים הקליניים, תזדקק רק לגוון CLOUD אוניברסלי אחד.



88% מרופאי השיניים מחזיקים במרפאה יותר מ-5 גווני VITA®¹

- 5 גווני CLOUD אוניברסליים מכסים את כל קשת הגוונים של VITA®¹
- התאמה מדויקת ואמינה של גוון השחזור לשיניים הסמוכות
- חסכון כסף ושטח מדף על-ידי צמצום מלאי המרפאה
- גוון BW נוסף המותאם לשחזורים בשיניים שעברו הלבנה

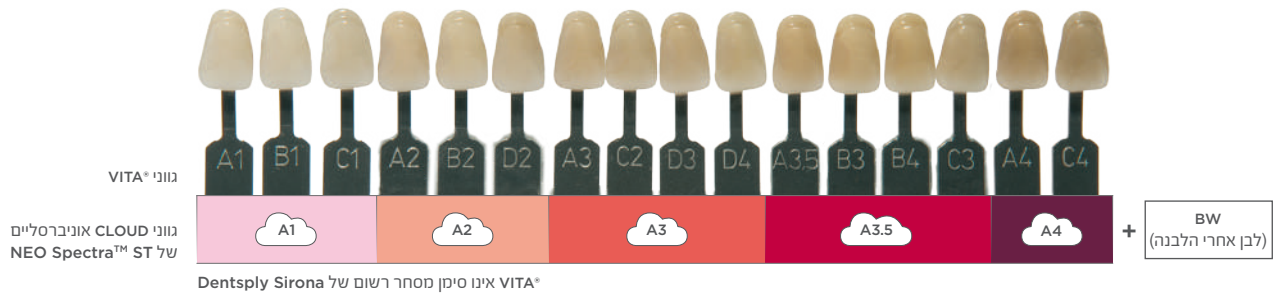


בנוסף-גווני דנטין ואמייל לאסתטיקה מורכבת באזורים קדמיים

למקרים מורכבים מבחינה אסתטית באזורים קדמיים, Neo Spectra™ ST Effects וגווני ה-CLOUD האוניברסליים של NEO Spectra™ ST עובדים יחד בשיטה פשוטה של הנחה בשכבות.



מרופאי השיניים אומרים שהתאמת הצבע היא האתגר הגדול ביותר בשחזורי קלאס VITA®².

- לבחירתך גוון אחד או שניים של אפקט דנטין להוספת אטימות
- גוון אחד של אפקט אמייל לקבלת קצה אינסזילי בעל שקיפות גבוהה
- מתכון וטכניקת עבודה פשוטה לקבלת תוצאות אסתטיות מתקדמות

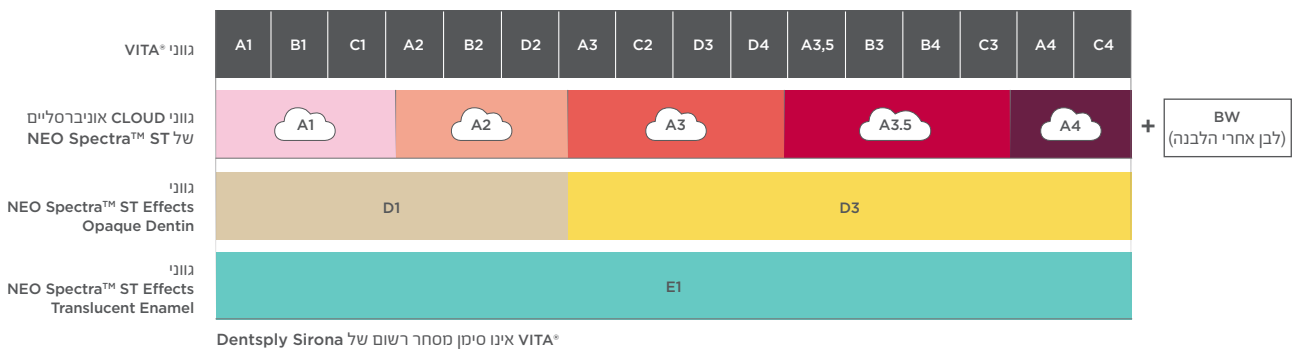

⁴ סקר חומרים לשחזורים ישרים, 107, Aegis Communications, 2016, משתתפים

⁵ The Key Group, Inc., 2018

Ordering Information

Neo Spectra™ ST

Universal Composite Restorative

HIGH VISCOSITY

Compules® Tips Intro Kit (HV) 607.01.970

24 HV Compules® Tips (Gray) Assorted - (0.25 g each)
(4 x A1; 4 x A2; 8 x A3; 4 x A3.5; 4 x A4)

1 Compules® Tips Gun

i-shade label

1 Bottle Prime&Bond Universal™ Adhesive (2.5 mL)

Accessories

Syringe Intro Kit (HV) 607.01.980

5 HV Syringes (Gray) Assorted - (3 g each)

(A1; A2; A3; A3.5; A4)

i-shade label

1 Bottle Prime&Bond Universal™ Adhesive (2.5 mL)

Accessories

Syringe Eco Kit (HV) 607.01.990

6 HV Syringes (Gray) Assorted - (3 g each)

(3 x A2; 3 x A3)

i-shade label

1 Bottle Prime&Bond Universal™ Adhesive (2.5 mL)

Accessories

Refills (HV)	Compules® Tips	Syringe
Shades	(16 x 0.25 g)	(1 x 3 g)
A1 (= VITA® shades A1; B1; C1)	607.01.971	607.01.981
A2 (= VITA® shades A2; B2; D2)	607.01.972	607.01.982
A3 (= VITA® shades A3; C2; D3; D4)	607.01.973	607.01.983
A3.5 (= VITA® shades A3.5; B3; B4; C3)	607.01.975	607.01.985
A4 (= VITA® shades A4; C4)	607.01.974	607.01.984
BW (Bleach White)	607.01.976	

LOW VISCOSITY

Compules® Tips Intro Kit (LV) 607.01.870

24 LV Compules® Tips (Blue) Assorted - (0.25 g each)
(4 x A1; 4 x A2; 8 x A3; 4 x A3.5; 4 x A4)

1 Compules® Tips Gun

i-shade label

1 Bottle Prime&Bond Universal™ Adhesive (2.5 mL)

Accessories

Syringe Intro Kit (LV) 607.01.880

5 LV Syringes (Blue) Assorted - (3 g each)

(A1; A2; A3; A3.5; A4)

i-shade label

1 Bottle Prime&Bond Universal™ Adhesive (2.5 mL)

Accessories

Syringe Eco Kit (LV) 607.01.890

6 LV Syringes (Gray) Assorted - (3 g each)

(3 x A2; 3 x A3)

i-shade label

1 Bottle Prime&Bond Universal™ Adhesive (2.5 mL)

Accessories

Refills (LV)	Compules® Tips	Syringe
Shades	(16 x 0.25 g)	(1 x 3 g)
A1 (= VITA® shades A1; B1; C1)	607.01.871	607.01.881
A2 (= VITA® shades A2; B2; D2)	607.01.872	607.01.882
A3 (= VITA® shades A3; C2; D3; D4)	607.01.873	607.01.883
A3.5 (= VITA® shades A3.5; B3; B4; C3)	607.01.875	607.01.885
A4 (= VITA® shades A4; C4)	607.01.874	607.01.884
BW (Bleach White)	607.01.876	

Compules® Tips Gun 606.65.900

1 Compules® Tips Gun

Neo Spectra™ ST Effects

Universal Composite Restorative

Compules® Tips Intro Kit 607.01.940

24 HV Compules® Tips (Gray) Assorted - (0.25g each)
(12 x D1; 8 x D3; 4 x E1)

Illustrated Technique Guide

i-shade label

Syringe Intro Kit (HV) 607.01.950

3 HV Syringes (Gray) Assorted - (3 g each)

(1 x D1; 1 x D3; 1 x E1)

Illustrated Technique Guide

i-shade label

Refills (HV)	Compules® Tips	Syringe
Shades	(16 x 0.25 g)	(1 x 3 g)
D1 (use with A1; A2)	607.01.942	607.01.952
D3 (use with A3; A3.5; A4)	607.01.943	607.01.953
E1 (use with A1; A2; A3; A3.5; A4)	607.01.941	607.01.951

Neo Spectra™ ST flow

Flowable Composite Restorative

Compula® Tips Introductory Kit 607.01.910

24 Compula® Tips (0.25 g ea)

(4 x A1; 4 x A2; 8 x A3; 4 x A3.5; 4 x A4)

1 Bottle Prime&Bond Universal™ Adhesive (2.5 mL)

Accessories

Compules Tips Gun

i-shade label

Syringe Introductory Kit 607.01.920

5 Syringes (1.8 g each)

(A1; A2; A3; A3.5; A4)

1 Bottle Prime&Bond Universal™ Adhesive (2.5 mL)

i-shade label

50 Syringe Tips

Accessories

Refills	Compula® Tips	Syringe
Shades	(16 x 0.25 g)	(2 x 1.8 g + 25 Syringe Tips)
A1 (= VITA® shades A1; B1; C1)	607.01.911	607.01.921
A2 (= VITA® shades A2; B2; D2)	607.01.912	607.01.922
A3 (= VITA® shades A3; C2; D3; D4)	607.01.913	607.01.923
A3.5 (= VITA® shades A3.5; B3; B4; C3)	607.01.915	607.01.925
A4 (= VITA® shades A4; C4)	607.01.914	607.01.924
BW (Bleach White)	607.01.916	607.01.926
D1 (Opaque Dentin)	607.01.918	607.01.928
D3 (Opaque Dentin)	607.01.919	607.01.929
E1 (Translucent Enamel)	607.01.917	607.01.927

Syringe Tips Refill 607.01.932

50 syringe tips

Neo Spectra™ ST Shade Guide 607.01.869

1 shade guide holder

9 shade guide tabs (A1, A2, A3, A3.5, A4, BW, D1, D3, E1)

To learn more about the Neo Spectra™ ST portfolio, visit www.dentsplysirona.com/NeoSpectraST-composites